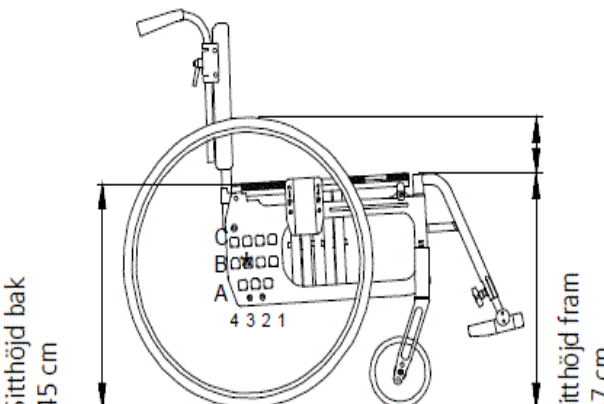


### Läs noggrant igenom inställningsunderlaget för att undvika felbeställningar

Rullstol Cross 1 Vårdarbroms utgick ur sortiment 2018-04-03. Detta beställningsstöd kan användas som hjälp vid exempelvis justering av sitthöjd på befintlig rullstol hos patient.

Beskrivning standardinställning:																		
Ryggstödshöjd 38 cm Sitthöjd bak 45 cm, drivhjulposition B, balansläge 3, cambervinkel 0 grader (annan cambervinkel inte möjlig) Sitthöjd fram 47 cm (länkhjul 6,5 tum, framgaffel medium)																		
Förändring av standardinställning																		
Önskar du andra inställningar ange aktuellt sesamnummer enligt nedan.																		
sesamnr	benämning	information																
51171	Ryggstödshöjd annan än std, ange höjd	Ryggstödshöjd är steglöst justerbar 30-45 cm (std 38 cm, anges inte)																
	Information om begränsningar vid val av sitthöjd (sitsvinkel). Max framåtvinkling: 2 cm lägre fram än bak (3 grader) Max bakåtvinkling: 6 cm högre fram än bak (9 grader)																	
51172	Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd och drivhjulposition A-C	Se höjder nedan, <b>annat drivhjul kan behöva beställas (2 st)</b>																
	<b>Sitthöjd bak</b> , för olika positioner se bild nedan																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Drivhjul 20tum</th> <th>Drivhjul 22tum</th> <th>Drivhjul 24tum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Position C</td> <td>38 cm</td> <td>40 cm</td> <td>41 cm</td> </tr> <tr> <td>Position B</td> <td>42 cm</td> <td>44 cm</td> <td><b>45 cm</b> (sitthöjd std 45, anges inte)</td> </tr> <tr> <td>Position A</td> <td>47 cm</td> <td>49 cm</td> <td>50 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Drivhjul 20tum	Drivhjul 22tum	Drivhjul 24tum	Position C	38 cm	40 cm	41 cm	Position B	42 cm	44 cm	<b>45 cm</b> (sitthöjd std 45, anges inte)	Position A	47 cm	49 cm	50 cm
	Drivhjul 20tum	Drivhjul 22tum	Drivhjul 24tum															
Position C	38 cm	40 cm	41 cm															
Position B	42 cm	44 cm	<b>45 cm</b> (sitthöjd std 45, anges inte)															
Position A	47 cm	49 cm	50 cm															
51174	Balansering annan än std, ange balansläge 1-4 (position A har endast balansläge 1-3)	Se balanslägen, bild nedan. Balansläge 1 är mest lätttrullad/lättippad (std 3 anges inte).																
	Bild för sitthöjd Bak och Balanseringslägen	 <p>24" drivhjul (läge B3), 6,5" länkhjul (läge M1) Vid 20" drivhjul kan ej läge C4 användas. Ej kompatibelt med bromsfunktion.</p>																
	Information angående begränsningar av vissa av ovanstående drivhjulpositioner A 1-3, B 1-4, C 1-4: C1 kan inte användas med 24 tum hjul C4 kan inte användas med 20 tum drivhjul, broms fungerar inte C4 drivhjul monterat i denna position kan inte kombineras med Transportfäste och 2 gr Cambervinkel, då transportfästet hamnar i konflikt med ekrarna.																	
	Sitthöjd fram, se nästa sida																	

## Beställningsstöd Inställning Cross 1 Vårdarbroms

51176	Sitthöjd Fram annan än std, ange höjd	Se höjder nedan ( <i>std 47 cm anges inte</i> ). <b>Annat länkhjul och framgaffel kan behöva beställas.</b> För vissa höjder finns olika valmöjligheter av länkhjul. <b>OBS! Beställ 2 av varje</b>
Sitthöjd fram cm	Val av länkhjul och framgaffel	
38-45	Beställ länkhjul <b>5tum</b> art nr 35082 och framgaffel kort art nr 15743	
43-50	Beställ länkhjul <b>5tum</b> art nr 35082. Framgaffel medium ingår i standardutförande	
41-46	Länkhjul <b>6,5tum</b> ingår i standardutförande. Beställ framgaffel kort art nr 15743	
44-51	Länkhjul <b>6,5tum</b> och framgaffel medium ingår i standardutförande. Ange ev annan höjd än standard ( <i>std 47</i> )	
47-52,5	Beställ länkhjul <b>8tum (200x35mm)</b> , art nr 56978. OBS! Fungerar i balansläge 3-4 med benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Framgaffel medium ingår i standardutförande	
46,5-50,5	Beställ länkhjul <b>8tum (200x50mm)</b> , art nr 74878. OBS! Fungerar i balansläge 3-4 med benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Beställ framgaffel Transit art nr 63992	