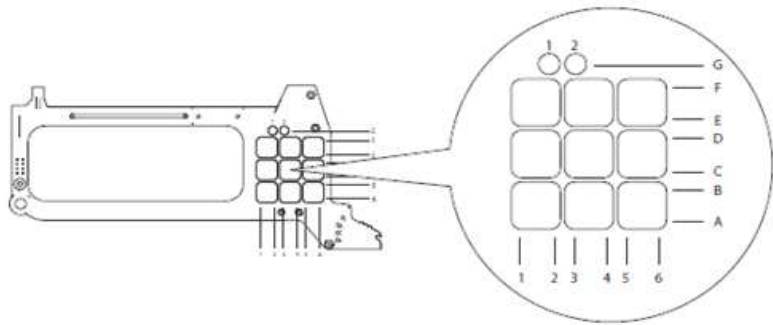


Läs noggrant igenom inställningsunderlaget för att undvika felbeställningar

Rullstol Cross 5 är i standardutförande inställd enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen levererad med dessa inställningar behöver du inte ange några artikelnummer för inställningar.

Beskrivning standardinställning																																										
Ryggstöd höjd 40 cm. Ryggstöd kan variera mellan rygg biangulär och rygg triangulär. Sitthöjd bak 45 cm, drivhjulposition D, balansläge 3, cambervinkel 2 grader Sitthöjd fram 47 cm (länkhjul 6,5 tum, framgaffel medium)																																										
Förändring av standardinställning																																										
Önskar du andra inställningar ange aktuellt sesamn enligt nedan.																																										
sesamnr	benämning	information																																								
51171	Ryggstödshöjd annan än std, ange höjd	Ryggstödshöjd är steglöst justerbar 32-45 cm <i>(std 40 cm, anges inte)</i>																																								
58274	Växlingssats rygg Cross 5 från biangulär till triangulär	Beställs om rullstolen måste vara försedd med rygg triangulär																																								
Information om begränsningar vid val av sitthöjd (sitsvinkel)																																										
Max framåtvinkling: 2 cm lägre fram än bak (3 grader)																																										
Max bakåtvinkling: 6 cm högre fram än bak (9 grader)																																										
51172	Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd och drivhjulposition A-G <i>Sitthöjd std 45 cm, anges inte</i>	Se höjder och positioner nedan, annat drivhjul kan behöva beställas (2 st) . Vid Pos G behöver Distans drivhjul låg, art nr 58204 beställas (2 st). För rullstol med vårdarbroms beställs istället 58779 (1 st).																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Drivhjul 20 tum</th> <th>Drivhjul 22 tum</th> <th>Drivhjul 24tum</th> <th>Drivhjul 26tum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pos G</td> <td>34 cm</td> <td>36,5 cm</td> <td>39 cm</td> <td>inte möjligt</td> </tr> <tr> <td>Pos F</td> <td>36 cm</td> <td>38,5 cm</td> <td>41 cm</td> <td>43 cm</td> </tr> <tr> <td>Pos E</td> <td>38 cm</td> <td>40,5 cm</td> <td>43 cm</td> <td>45 cm</td> </tr> <tr> <td>Pos D</td> <td>40 cm</td> <td>42,5 cm</td> <td>45 cm (std)</td> <td>47 cm</td> </tr> <tr> <td>Pos C</td> <td>42 cm</td> <td>44,5 cm</td> <td>47 cm</td> <td>49 cm</td> </tr> <tr> <td>Pos B</td> <td>44 cm</td> <td>46,5 cm</td> <td>49 cm</td> <td>51 cm</td> </tr> <tr> <td>Pos A</td> <td>46 cm</td> <td>48,5 cm</td> <td>51 cm</td> <td>53 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Drivhjul 20 tum	Drivhjul 22 tum	Drivhjul 24tum	Drivhjul 26tum	Pos G	34 cm	36,5 cm	39 cm	inte möjligt	Pos F	36 cm	38,5 cm	41 cm	43 cm	Pos E	38 cm	40,5 cm	43 cm	45 cm	Pos D	40 cm	42,5 cm	45 cm (std)	47 cm	Pos C	42 cm	44,5 cm	47 cm	49 cm	Pos B	44 cm	46,5 cm	49 cm	51 cm	Pos A	46 cm	48,5 cm	51 cm	53 cm	
	Drivhjul 20 tum	Drivhjul 22 tum	Drivhjul 24tum	Drivhjul 26tum																																						
Pos G	34 cm	36,5 cm	39 cm	inte möjligt																																						
Pos F	36 cm	38,5 cm	41 cm	43 cm																																						
Pos E	38 cm	40,5 cm	43 cm	45 cm																																						
Pos D	40 cm	42,5 cm	45 cm (std)	47 cm																																						
Pos C	42 cm	44,5 cm	47 cm	49 cm																																						
Pos B	44 cm	46,5 cm	49 cm	51 cm																																						
Pos A	46 cm	48,5 cm	51 cm	53 cm																																						
51174	Balansering annan än std, ange balansläge 1-6	Se balansläge ovan. Balansläge 1 är mest lätttrullad/lättippad <i>(std 3 anges inte)</i>																																								
57661	Camberbricka yttre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st <i>(std 2 grader)</i>																																								
57662	Camberbricka inre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st <i>(std 2 grader)</i>																																								
	Sitthöjd Fram, se nästa sida																																									

51176	Sitthöjd Fram annan än std, ange höjd	Se höjder nedan (<i>std 47 cm, anges inte</i>) . Annat länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste kan behöva beställas. För vissa höjder finns olika valmöjligheter av länkhjul. OBS! Beställ 2 st av varje
	Sitthöjd fram cm	Val av länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste
	34-39,5	Beställ länkhjul 4tum (brukarvikt max 100kg) art nr 57570 , framgaffel kort special art nr 57658, framgaffelfäste lågt art nr 57663 och lock framgaffelfäste 51449
	36-43	Beställ länkhjul 5tum art nr 35082 , framgaffel kort art nr 15743, framgaffelfäste lågt art nr 57663 och lock framgaffelfäste 51449
	37,5-44,5	Beställ länkhjul 5tum art nr 35082 och framgaffel kort art nr 15743
	43-49	Beställ länkhjul 5tum art nr 35082. Framgaffel medium ingår i standardutförande
	41-46,5	Länkhjul 6,5tum ingår i standardutförande. Beställ framgaffel kort art nr 15743
	46-51	Länkhjul 6,5tum och framgaffel medium ingår i standardutförande. Ange ev annan höjd än standard (<i>std 47</i>)
	48-52	Beställ länkhjul 8tum (200x35mm) , art nr 56978. OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Framgaffel medium ingår i standardutförande
	47-51	Beställ länkhjul 8tum (200x50mm) , art nr 74878. OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Beställ framgaffel Transit art nr 63992
	50,5-55,5	Länkhjul 6,5tum ingår i standardutförande. Beställ framgaffel lång art nr 66946
	52,5-56,5	Beställ länkhjul 8tum (200x35mm) , art nr 56978. OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Beställ framgaffel lång art nr 66946