


En RITE-hörapparat (Receiver In The Ear), även kallad RIC eller RIE, har en sladd (receiver) som går från hörapparaten till en högtalare. Vid änden av högtalaren sitter ett vaxfilter, som oftast är vitt, och över vaxfiltret sitter en gummidel som kallas för dome. På högtalaren kan det finnas en lång genomskinlig plastbit som kallas för stödvinge, den placeras i ytterörat. Stödvingen kan tas bort. Vänster hörapparat har en blå markering och höger har en röd.

Regelbunden kontroll och rengöring av hörapparaten rekommenderas. Rengör inte din hörapparat med vatten. Om hörapparaten inte fungerar som den ska kan du själv felundersöka den. Försök inspektera batteriet, vaxfiltret och domen för att finna orsaken. Hittar du inte problemet kan du kontakta din audionom för rådgivning eller boka ett jourbesök.

## Dome

Domen har en akustisk funktion. Huvudsakligen finns det fyra olika typer av domer, det finns även formgjutna domer. Domen väljs utifrån individens hörselnedsättning.

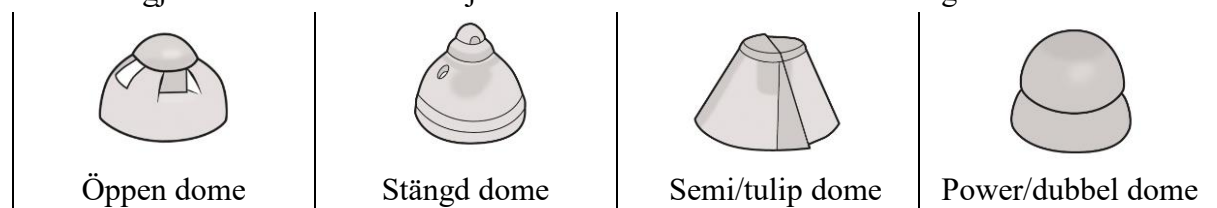

## Rengöring av domen

Om domen sitter kvar på högtalaren använd något torrt att torka rent den med, t.ex. papper. Vid behov kan domen rengöras mer grundligt. Ta då av domen från högtalaren och lägg domen i ljummet vatten med tvål/diskmedel i ungefär 15-20 min. Torka domen noggrant efteråt. Domen får inte vara blöt när den träas på högtalaren igen, högtalaren kan då gå sönder och hörapparaten blir tyst. (Tips! Låt domen torka över natten).

Byt ut domen om den är sliten, stel, missformad, sönder eller full med vax som inte går bort.

**Extra domer får du från din audionom när du provar ut din hörapparat. Du kommer sedan att få beställa dessa tillbehör själv, direkt från leverantören.**

**Fråga din audionom efter en beställningsblankett.**


## Skötsel av vaxfilter och dome för RITE-hörapparater

### Vaxfilter


Vaxfiltret, även kallat filter, sitter under domen. Filter byts vid behov. Ta av domen och bedöm om filtret behöver bytas ut till ett nytt. Om det är fullt med vax i filtret blir förstärkningen från hörapparaten svag eller kan upplevas som helt tyst.

Den svarta änden av filterpinnen skall användas för att ta bort det smutsiga filtret på hörapparaten och på den andra änden sitter ett nytt filter som ska tryckas fast.


### Genomförande

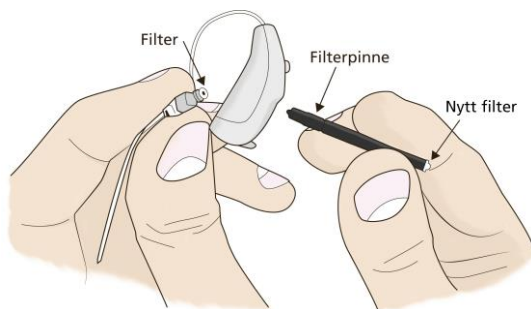


1. Ta av domen från högtalaren och ta fram din filterpinne.

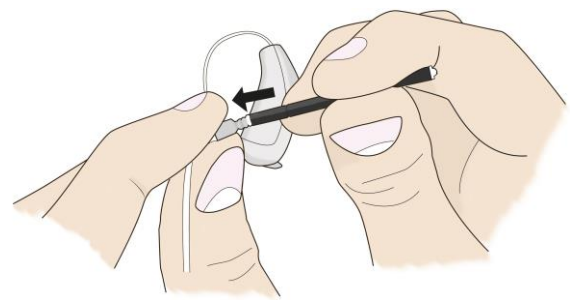


2. Tryck in filterpinnens svarta ände i mitten av det smutsiga filtret på högtalaren.

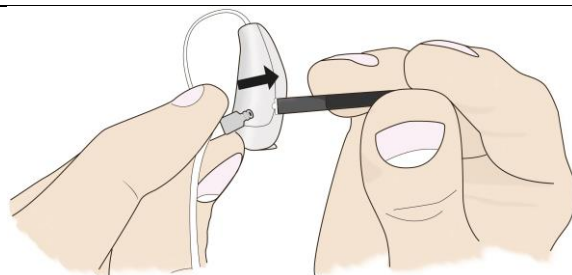


3. Dra ut filterpinnen rakt ut så hänger det smutsiga filtret med.  
Vissa filter kräver att filterpinnen snurras 1-3 varv medsols innan filtret kan tas ut.

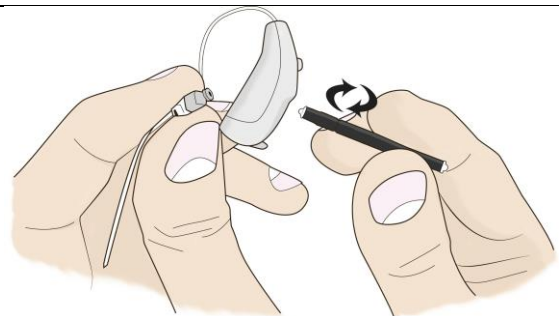

4. Vänd på filterpinnen så du får fram det nya filtret som ska sättas fast i högtalaren.

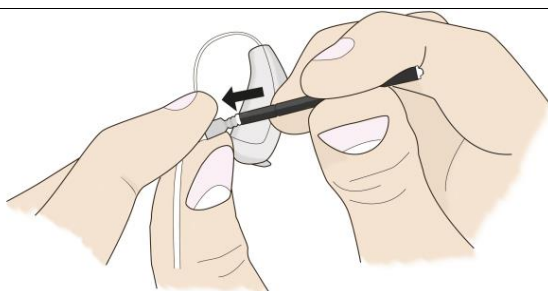

5. Utför samma procedur som i bild 2, men nu trycker du fast det nya filtret.

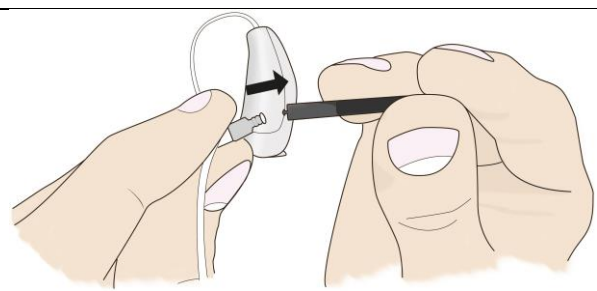

6. Dra filterpinnen rakt ut och det nya filtret sitter nu på plats. Vaxfiltret är nu utbytt!

**Filter får du från din audionom när du provar ut din hörapparat. Du kommer sedan att få beställa dessa tillbehör själv, direkt från leverantören.**

**Fråga din audionom efter en beställningsblankett.**