


## Skötsel av hörapparat med formgjuten insats

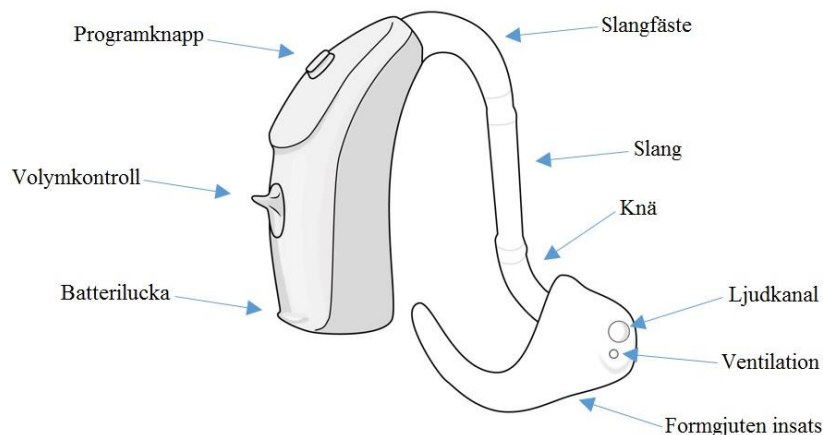

### Slang

Slangen sitter mellan slangfästet och insatsen. Slangen bör bytas ut ungefär en gång varannan månad. För att trä på den nya slangen kan du försöka töja ut den med t.ex. en blyertspenna. För att få rätt längd på slangen kan den tidigare slangen användas som mall. Har slangen tagit slut kan du ringa din Audionommottagning och be att få mer hemskickad via posten.

### Insats


**Daglig rengöring:** Torka bort vax från insatsen med vanligt hushållspapper eller torr trasa. Se till att ljudkanalen och ventilationen är fria från vax. Vax i insatsen försvagar förstärkningen.

**Veckovis rengöring:** Varje vecka (eller vid behov) bör insatsen rengöras genom att lägga den i varmt eller ljummet vatten med diskmedel eller tvål i, låt den ligga i ca 20-30 minuter.


### Felsökningsschema

Problematik	Orsak	Åtgärd
Hörapparaten är tyst	Batteriluckan är öppen	Stäng batteriluckan
	Batteriet är slut eller felinsatt	Byt eller vänd på batteriet
	Vax i ljudkanal/ventilation	Rengör ljudkanal/ventilation
	Vatten eller fukt i insatsen eller slangen	Ta loss insatsen/slangen från hörapparaten och blås torrt
Svagt ljud i hörapparaten	Svagt batteri	Byt batteri
	Vax i insatsen	Rengör insatsen och ljudkanal
	Smutsiga mikrofonfilter	Byt filter eller boka jourbesök hos din Audionommottagning
	Telespolen är på	Ändra till startprogrammet
	Slangen är gul och hård	Byt slang
Rundgång i hörapparaten	Insatsen sitter felaktigt i örat	Försök att placera den korrekt
	Slangen är för kort	Kontrollera slangens längd
	Slangen är sönder	Byt ut slangen
	Vaxpropp i örat	Kontakta din vårdcentral eller en läkare
	Insatsen har tappat passform och sitter löst i örat	Kontakta din Audionommottagning
Hörapparaten ramlar av örat	Slangen är för lång	Kontrollera slangens längd och korta ner den


## Rengöring av den formgjutna insatsen

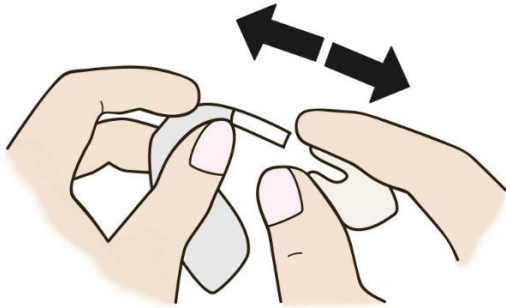

1. Ta loss insatsen från slangen

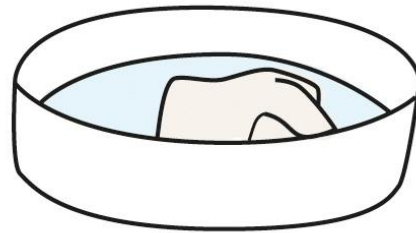


2. Lägg insatsen i ljummet vatten med tvål/diskmedel i ca 15 min

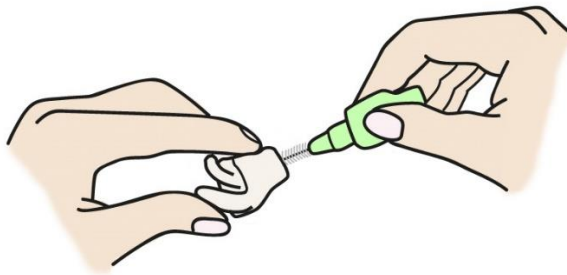

3. Använd en mellanrumsborste för att rengöra ljudkanal och ventilation




4. Skölj av insatsen och ljudkanalen med rinnande vatten så all tvål är borta

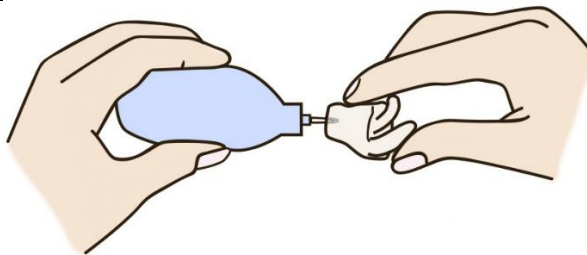


5. Blås ut vatten som kan finnas kvar ur ljudkanal och ventilation



6. Insatsen kan få torka över natten (Valfritt steg)

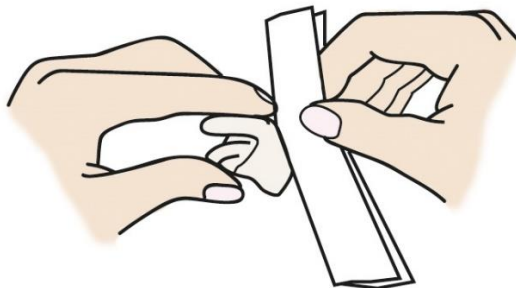

7. Kontrollera att insatsen har torkat med vanligt hushållspapper

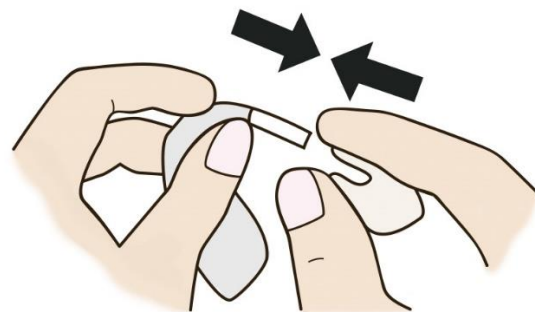

8. Fäst insatsen på slangen igen

**Sätt ihop rätt hörapparat med rätt insats**

**Vänster → Blå**

**Höger → Röd**